

レプリカ ガンの使い方

1. レプリカリングをシートからはがし、裏面の粘着質の部分を肌に押し当てお肌の診断したい部分に貼り付けます。レプリカリング中央部の上側の紙の部分と下側のウレタン部分とをいっしょに抜き取り、捨ててください。



←リング丸型



リング角型→

2. レプリカガンに黒いプラスチックの付属品を取り付けます。



①レバーを押し上げ、



②丸いくり抜きがある側からギザギザした面を下にし、本体にさしこみます。



③取り付け完了

3. 2種のレプリカ剤が入っているカートリッジをレプリカガンに装着します。カートリッジを入れる向きに上下左右はありません。




カートリッジは、本体上部にあるツメで固定してください。


4. ①カートリッジの先についているキャップを左に90度回転させてはずし、②オートミックスノズルをつけます。(中身が残っている状態でしばらくレプリカを使用しない時は、カートリッジにキャップをつけて保存してください。またカートリッジキャップやオートミックスノズルを着脱する際、カートリッジの口についた溶剤はきれいに拭取ってください)。



カートリッジキャップ

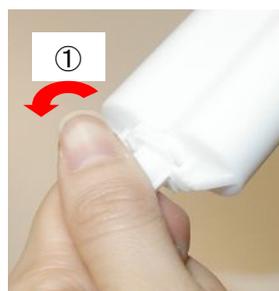

①

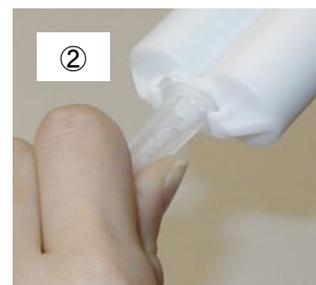

②

5. 右のようにレプリカガンのハンドルを握ると、レプリカ剤が自動的にまざってノズルの先から出てきます。まず 2cm 程度を試しに出して十分混ざっていることを確認した後ゆっくりと握りながら、レプリカリングの中央の穴に搾り出します。搾り出したあとは、液だれしないように気をつけてください。中身が残っていてもノズルを交換すれば、何度かに分けてお使いいただけます。



6. レプリカ剤をリングに搾り出してから5分以上放置し、レプリカが固まったら、リング上部の紙のつまみを持ち上げはがしてください。固まったレプリカ剤の裏側がお肌のレプリカです。



仕上がりレプリカ

7. 最後に、肌上に残っているレプリカリングのウレタン部分を肌から取り外し、捨ててください。

東京都文京区本駒込6-5-3
ビューネ本駒込 5階
プロモツール株式会社
Tel:03-5940-6637
Fax:03-5940-6685